

ワイデックスならいつでも安心。保証とアフターサービス

ご購入日

1～2年目

3年目

4年目

修理保証

自然故障の際に無償で
修理を受けられる期間
(過失等による故障を除きます)

あんしん修理

最大2万円*で修理を
受けられる期間

*アンプが含まれる修理は最大5万円になります。●RIC/RITEタイプのレシーバー、イヤワイヤは2年保証です。●充電式補聴器の充電器等アクセサリは1年保証です。●さらに安心の『1年延長保証・紛失保証』(有償オプション)もご用意しております。詳しくは取扱店にお問い合わせください。

このような症状がある方は、耳鼻科の専門医に補聴器のご使用についてご相談ください。

- 耳の手術を受けたことがある。
- 耳だれ、耳鳴り、耳の痛み、目まいなどの自覚症状がある。
- 中耳炎を患っている。
- 耳あかが大量に出る。
- 聴力が急激に衰えた。

補聴器の装用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察を受けることをお勧めします。

補聴器は個々の難聴や聞こえの程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要で、適切なフィッティングによってその効果が発揮されます。しかし、装用者の聞こえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。



本社 〒131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー
一般のお客様専用お問い合わせフリーダイヤル:
TEL ☎ 0120-332-604 FAX ☎ 0120-332-394

ホームページ: <https://japan.widex.com/>

ワイデックス株式会社

Facebookもチェック



ワイデックス補聴器のご相談、ご用命は当店へ。お気軽にご来店ください。

※補聴器本体は非課税です。ただし、アクセサリ・周辺機器は課税対象です。

※カタログに掲載されている価格はメーカー希望小売価格です。

※製品のデザイン、仕様、価格などは予告なく変更される場合があります。

※カタログに掲載されている製品の色は、印刷により実際と多少異なる場合があります。

※このカタログの内容は2021年6月現在のものです。



人生を楽しむ。 スマートに愉しむ。

ワイデックス [マグニファイ]

WIDEX MAGNIFY™



さらにアクティブな毎日へ。 補聴器の常識を超えて、できること多彩。



いつも身につける補聴器だから、もっと暮らしをサポートするアイテムであって欲しい。
そんな想いに応えてMAGNIFYは、先進の機能を装備しています。

自然な音を、だれにも手軽に。

1956年にデンマークで創立以来、ワイデックスが求め続けている理想の音『MOST NATURAL SOUND（モスト ナチュラル サウンド）』を可能にする数々の独自技術は、MAGNIFYにも脈々と受け継がれています。一人ひとりの使用状態に合わせて、より自然で快適な聞こえ方を実現する「トゥルーアコースティクス™」もその一つです。



もっと自由に、音楽やテレビを楽しむ。

電話やテレビがより快適に。補聴器に直接届いたスマートフォンの音声や音楽をワイヤレスイヤホンのように聞いたり、専用のアクセサリーを使って、音量を気にせず家族と一緒にテレビを鑑賞したり。MAGNIFYは、会話を楽しむだけじゃもったない魅力にあふれた補聴器です。




スマートフォンをリモコン代わりに



テレビ用アクセサリー

らくらく操作で迫力のサウンドを。

高品質なステレオ音声を快適に。

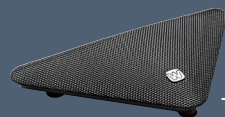

TV PLAY
44,000円(税込)



TV-DEX
44,000円(税込)

最新の充電式もラインナップ。

電池交換不要で、らくらく。夜間に充電しておくと、朝起きてから電池切れを気にせず1日しっかり使える人気の充電式も選べます。



充電器

充電・乾燥・除菌がこれ一台で完結。

置くだけで、かんたん充電。



mRIC除菌乾燥充電器
WPC1 33,000円(税込)



mRIC充電器
WPT1 20,000円(税込)

喜びが聞こえる。楽しみが広がる。 プライスも魅力的に、 補聴器の新世代。

聞こえに妥協なく。機能に拔かりなく。

補聴器のリーディング・カンパニー、ワイデックスのこだわりを

リーズナブルな価格でカタチにしたのがWIDEX MAGNIFY™[マグニファイ]です。

自然な音質と会話のしやすさに加え、最新機能の搭載で

スマートフォンやテレビをよりいい音で快適に楽しめます。

さらに、人気の充電式もラインナップ。

MAGNIFYが、あなたのアクティブライフを豊かに広げます。

ワイデックス[マグニファイ]

WIDEX MAGNIFY™



耳かけ型補聴器 MAGNIFY 303AFBZX00023000



耳かけ型
[RIC/RITEタイプ]

電池交換の
手間いらずで
らくらく便利

mRIC R D
[MRR2D]
リチウムイオン充電式

電話やテレビも
いい音で楽しむ。
コンパクトサイズ

RIC 312 D
[MRB2D]

コンパクトサイズ
でつけ外し
しやすい

BTE 312
[MBB2]

長い電池寿命
が魅力。本体で
操作できます

BTE 13 D
[MBB3D]

MAGNIFY 100 [M10]	片耳: 160,000 円 [※] 両耳: 270,000 円 [※]	
MAGNIFY 50 [M05]	—	片耳: 140,000 円 [※] 両耳: 240,000 円 [※]

※ mRIC R D の価格は補聴器本体のみとなります。別売の専用充電器が必要です。
WPC1: 33,000 円 (税込)、WPT1: 20,000 円 (税込) [前ページ参照]

■主な搭載機能

機能名称	概要	MAGNIFY 100	MAGNIFY 50
トゥルー アコースティクス™	音のひずみを高度な演算によって自動補正し、高音から低音まで快適な聞こえを実現します。	●	●
トゥルー インプットテクノロジー	入力音の限界値を 113dB まで拡張。劣化の少ない音質、音声情報を維持します。	●	●
騒音制御・ SIS 語音強化システム	言葉と騒音が混在している環境下で、騒音を抑えつつ言葉を強調して伝えてくれます。	●	▲
ソフトレベル騒音抑制	エアコンや換気扇の音といった、小さくわずらわしい音を抑えて、言葉をより聴き取りやすくしてくれます。	●	●
チャンネル数	低音域から高音域までの音をいくつに分割処理しているかを示しています。	6	4
オーディビリティ エクステンダー	音量を大きくしても聞こえない高音域を、聞こえる音域(低音域)に移調して再生します。	●	—

■豊富なカラーラインナップからお好みの一台を選びましょう

116
ダーク
チェリー
(標準色)

118
テック
ブラック
(標準色)

119
シルバー
グレイ
(標準色)

123
オータム
ペーージュ
(標準色)

068
パール
ホワイト

076
スポーティ
レッド

077
フレッシュ
ピンク

078
エーゲ
ブルー

114
ハニード
ブロンド

115
チェスナット
ブラウン

120
ゴールド
デン
ブラウン

121
チタニウム
グレイ

136
ディープ
ブルー

*画像は、mRIC R D のものです。カラーバリエーション、名称は全モデル共通です。

■対応機能・性能一覧表

性能はJIS 5512:2015に準拠しています。(通常使用時とは数値が異なる場合があります)

モデル			mRIC R D [MRR2D]	RIC 312 D [MRB2D]	BTE 312 [MBB2]	BTE 13 D [MBB3D]
適応聴力			軽中高	軽中高 ^{※1}	軽中高	軽中高重
スマートフォンの通話や音楽を 直接補聴器で聞く機能 ^{※2}			●	●		●
スマートフォンで 補聴器を操作する 時の対応アプリ	MAGNIFY アプリ		●	●		●
	TONELINK アプリ		●	●	●	●
テレビ音声を直接 補聴器で聞く時の 対応機器 (別売)	TV PLAY		●	●		●
	TV-DEX		●	●	●	●
防塵防水国際保護等級			生活防水 IP68	生活防水 IP68	生活防水 IP68	生活防水 IP68
プログラムボタン付			●	●	●	●
ポリウムコントロール付						●
テレコイル標準装備				●		●
90dB 入力 最大出力 (dB SPL)	HFA- OSPL90	S レシーバー		103		
		M レシーバー	115	111		
		P レシーバー	123	121		
		HP レシーバー		128		
					123	127
	最大 OSPL90	S レシーバー		108		
		M レシーバー	117	115		
		P レシーバー	124	123		
		HP レシーバー		135		
					130	136
最大音響利得 HFA-FOG		S レシーバー		52		
		M レシーバー	59	57		
		P レシーバー	63	61		
		HP レシーバー		71		
					53	62
誘導コイル最大感度 HFA-MASL		S レシーバー		80		
		M レシーバー	—	86		
		P レシーバー	—	90		
		HP レシーバー		100		
					—	91
使用電池			リチウムイオン充電電池	PR41 (312)	PR41 (312)	PR48 (13)
電池寿命連続時間(約)		S レシーバー		160h		
		M レシーバー	*注3	150h		
		P レシーバー	*注3	140h		
		HP レシーバー		140h		
					140h	200h

*注1: HP レシーバーのみ。 *注2: ダイレクトストリーミングはiPhoneのみ。 *注3: リチウムイオン充電電池の連続使用時間の目安は4時間の満充電で約20時間です。(ストリーミング使用なし) ※空気電池や充電電池の寿命は、補聴器の設定や使用状況、季節によって変化することがあります。(1日あたりの使用時間が短い場合や冬季など低温で乾燥した条件で使用した場合、また、ストリーミングなどの機器と通信して使用した場合、電池寿命は表示より短くなります)